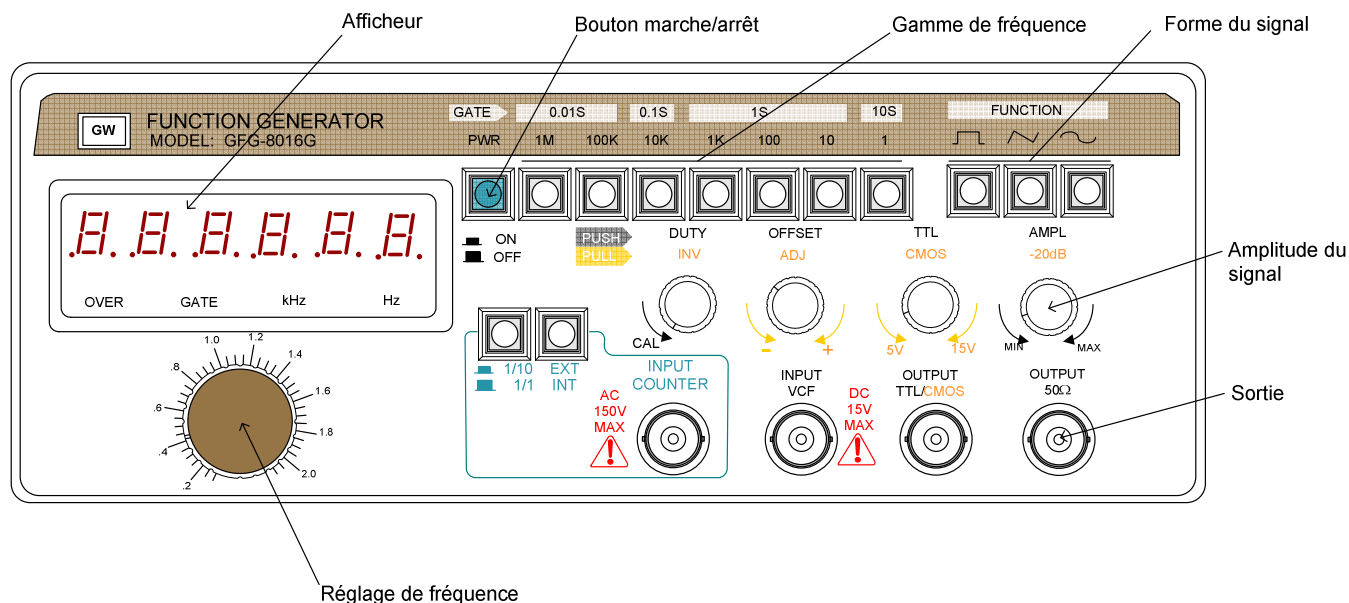




Remarque: Allumer le G.B.F en début de séance et le laisser fonctionner jusqu'à la fin. La fréquence de sortie est plus stable quand les composants ont atteint leur température optimale de fonctionnement.

Principaux réglages :

	Bouton Marche/ Arrêt
	Choix de la forme du signal : : Carré (ou Créneaux) : Triangulaire (ou dents de scie) : Sinusoïdal.
	Choix de la gamme de fréquence
	Réglage de la fréquence.
	Réglage de l'amplitude de la tension de sortie.

mode d'emploi.	Principaux réglages du GBF	septembre 07
----------------	-----------------------------------	-----------------

Conseils:

Eviter de choisir une amplitude trop grande (les signaux sont déformés);

Eviter de choisir une très haute ou très basse fréquence (les signaux sont soit déformés, soient très difficiles à observer à l'oscilloscope).

Si vous n'observez rien:

Vérifier que le G.B.F est allumé ;

Vérifier que vous avez choisis une forme de signal ainsi qu'une gamme de fréquence;

Vérifier que l'amplitude ne soit pas nulle;

*Vérifier votre montage: La borne rouge du G.B.F ne doit **jamais** être reliée à la masse.*